

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜わり厚くお礼申し上げます。
このたび、下記の検査項目におきまして、検査内容を変更させて
いただくことになりましたのでご案内を致します。
何卒ご理解ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白


記

- 変更実施日：2025年10月1日（水）ご依頼分より
- 変更内容：検査内容の変更（測定機器・試薬等変更の為）


コード	検査項目名		新	旧
0149	C-ペプチド (CPR)	材料	血清	血清
		測定方法	CLEIA法	ECLIA法
		基準値	0.62~2.54 ng/mL (空腹時負荷前)	0.8~2.5 ng/mL (空腹時負荷前)
0169	C-ペプチド (CPR)	材料	蓄尿	蓄尿
		測定方法	CLEIA法	ECLIA法
		基準値	45~117 µg/day	22.8~155.2 µg/day
4000	IgE(RIST)	測定方法	CLEIA法	ECLIA法
		基準値	170以下 IU/mL	170以下 IU/mL
0218	β2マクログロブリン	測定方法	CLEIA法	ラテックス比濁法
		基準値	1.09以下 mg/L	2.0以下 mg/L
3301	HBs抗原精密測定	測定方法	CLEIA法	CLEIA法
		基準値	5.0未満 mIU/mL (-)	0.03未満 IU/mL (-)
3303	HBs抗体精密測定	測定方法	CLEIA法	CLEIA法
		基準値	10.0未満 mIU/mL (-)	5.0未満 mIU/mL (-)

《 検査項目関連データ一覧 》


Cペプチド
(CPR)

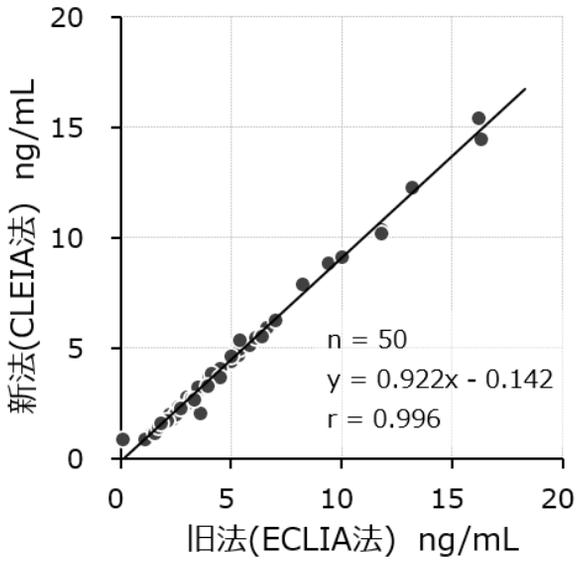


IgE (RIST)
非特異的IgE定量

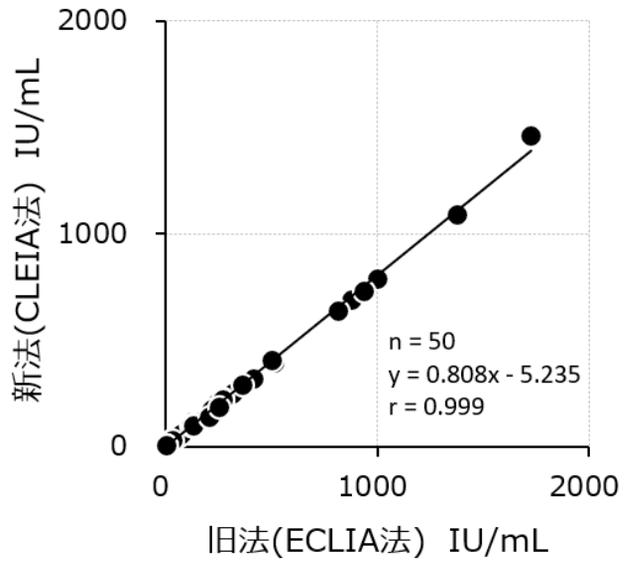

β2マイクログロブリン
(β2m)

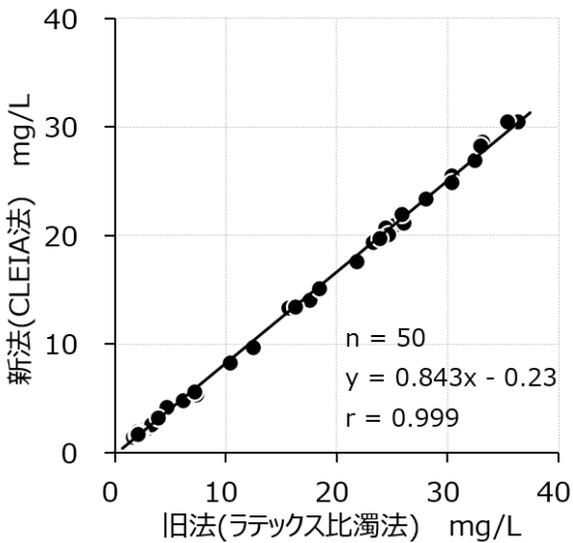


HBs抗原 精密測定

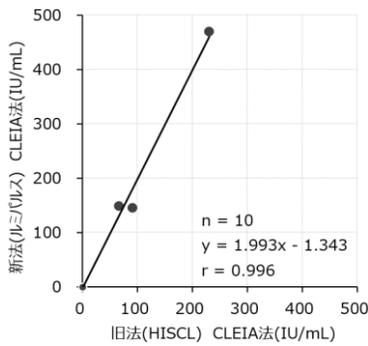

		HISCL		
		+	-	計
ルミリス (G1200)	+	7	0	7
	-	0	43	43
計		7	43	50

全体一致率：100.0 %
陽性一致率：100.0 %
陰性一致率：100.0 %

HBs抗体 精密測定

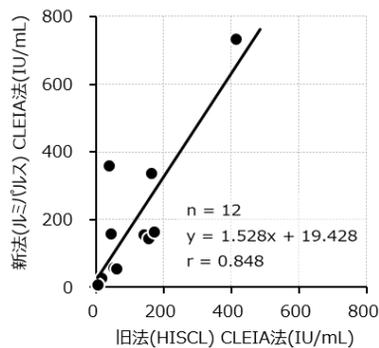

		HISCL		
		+	-	計
ルミリス (G1200)	+	12	2	14
	-	2	34	36
計		14	36	50

全体一致率：92.0 %
陽性一致率：85.7 %
陰性一致率：94.4 %

お問い合わせ 株式会社CIS 熊本中央研究所
TEL(096)284-1381